


ESTRUTURA DAS TABELAS E VIEWS PARA INTEGRAÇÃO myLIMS E SISTEMAS FINANCEIROS

1 - Objetivo

Definir a EDI (Electronic Data Interchange) entre o myLIMS e sistemas de controle financeiro e de faturamento.

2 - Estratégia de Integração

A interface de troca de dados consiste em tabelas para integração com o prefixo "ITB_" e views para integração com prefixo "IVW_", que são disponibilizadas no banco de dados do myLIMS. Será criado um usuário chamado "i_mylims" com senha "i_mylims", com acesso restrito aos dados necessários para a integração. A estratégia da integração pode ser visualizada graficamente abaixo:

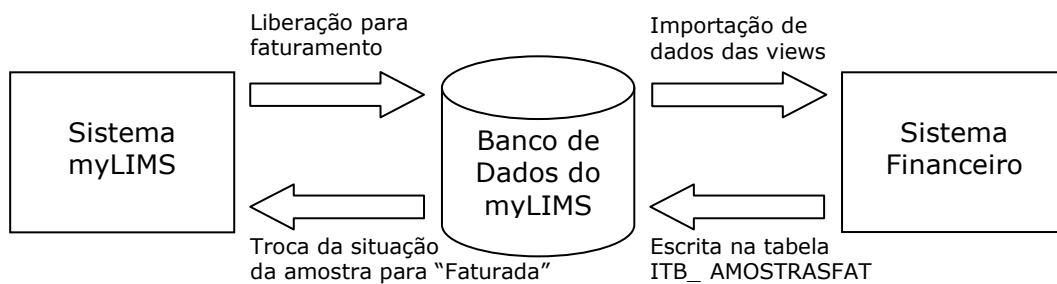

3 - Estrutura do banco de dados de integração

3.1 - View IVW_ITENSFATURA

Lista os itens disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDITEM	Inteiro	Código do item do processo.
CNPJCPFCON	Texto (20)	CNPJ ou CPF do contratante, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFSOL	Texto (20)	CNPJ ou CPF do solicitante, sem formatação de ponto, traço ou barra.
IDAUXCOLETA	Inteiro	Código da coleta da amostra.
IDFATURAMENTO	Inteiro	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento caso o item já tenha sido faturado.
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
NRAMOSTRA	Texto (20)	Número visual da amostra (boletim de análise, relatório técnico ou laudo) para opcionalmente constar na nota fiscal.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
NRRELATORIO	Texto (20)	Número visual do relatório da amostra (boletim de análise, relatório técnico ou laudo) para opcionalmente constar na nota fiscal. Este campo pode ser usado no lugar do campo NRAMOSTRA quando o laboratório utiliza numeração independente para os relatórios da amostra.
IDAMOSTRA	Texto (250)	Identificação da amostra.
IDPROCESSO	Texto (250)	Identificação de um processo qualquer vinculado à amostra. Não é a identificação do processo comercial.
IDTIPOAMOSTRA	Texto (100)	Identificação do tipo da amostra.
NMTIPOAMOSTRA	Texto (100)	Nome do tipo da amostra.
NMSITAMOSTRA	Texto (100)	Situação atual da amostra.
IDUNIDADESER	Texto (100)	Identificação da unidade de serviço da amostra.
IDUNIDADENEG	Texto (100)	Identificação da unidade de negócio da amostra.
DTEDICAO	Data e Hora	Data da última edição da amostra.
DTLIBERAFAT	Data e Hora	Data e hora da liberação para faturamento. Caso seja nulo, o item é apenas previsão de faturamento.
DTPREVISTA	Data e Hora	Data prevista para finalização das análises.
DTPUBLICACAO	Data e Hora	Data da publicação da amostra. Indica o momento em que encerrou o trabalho do laboratório.
VLSERVICOS	Fracionário	Valor dos serviços analíticos realizados na amostra.
VLDESPAM	Fracionário	Valor das despesas individuais da amostra.
VLDESPITEMPRO	Fracionário	Valor de despesas de item de processo.
VLDESCONTO	Fracionário	Valor do desconto aplicado na amostra.
VLTOTAL	Fracionário	Valor total cobrado pelo serviço prestado. Somatório dos valores dos serviços analíticos realizados na amostra, despesas individuais da amostra e despesas de item de processo caso a amostra seja modelo de item de processo e possua tais despesas, menos o valor do desconto.

3.2 - View IVW_SERVICOSITEM

Lista os serviços analíticos (métodos de análise) realizados nas amostras que estão disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDITEM	Inteiro	Código do item do processo.
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
IDMETODO	Texto (100)	Identificação do método de análise ou serviço analítico realizado na amostra.
DESCMETODO	Texto (250)	Descrição do método de análise ou serviço analítico realizado na amostra.
NMLABORATORIO	Texto (100)	Nome do laboratório que realizou o método de análise ou serviço. Pode ser usado como centro de custo.
IDLABORATORIO	Texto (100)	Identificação do cadastro de laboratórios.
IDUDMETODO01	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 01.
IDUDMETODO02	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 02.
IDUDMETODO03	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 03.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDUDMETODO04	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 04.
CDUDMETODO01	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 01.
CDUDMETODO02	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 02.
CDUDMETODO03	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 03.
CDUDMETODO04	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 04.
NMUDMETODO01	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 01.
NMUDMETODO02	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 02.
NMUDMETODO03	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 03.
NMUDMETODO04	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 04.
VALOR	Fracionário	Valor cobrado pelo serviço analítico.

3.3 - View IVW_DESPESASITEM

Lista as despesas associadas às amostras disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDITEM	Inteiro	Código do item do processo.
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
CDESPESA	Inteiro	Código da despesa da amostra.
NMDESPESA	Texto (100)	Nome da despesa associada à amostra.
QUANTIDADE	Fracionário	Quantidade da despesa.
UNIDADE	Texto (50)	Unidade da despesa.
FLITEMPROCESSO	Texto (1)	Indica se a despesa é classificada como despesa de item de processo. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
VALOR	Fracionário	Valor total da despesa.

3.4 - View IVW_COLETA

Lista as coletas disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
IDAUXCOLETA	Inteiro	Código seqüencial da coleta.
IDFATURAMENTO	Inteiro	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento caso o item já tenha sido faturado.
IDCOLETA	Texto (250)	Identificação da coleta.
VLDESPESA	Fracionário	Valor total das despesas da coleta.
DTPREVISTA	Data e Hora	Data e hora prevista para acontecimento da coleta.
DTCOLETA	Data e Hora	Data e hora que ocorreu a coleta.
FLREALIZADA	Texto (1)	Indica se a coleta foi realizada. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.

3.5 - View IVW_DESPESASCOLETA

Lista as despesas associadas às coletas disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
IDAUXCOLETA	Inteiro	Código seqüencial da coleta.
CDESPESA	Inteiro	Código da despesa da amostra.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
NMDESPESA	Texto (100)	Nome da despesa associada à amostra.
QUANTIDADE	Fracionário	Quantidade da despesa.
UNIDADE	Texto (50)	Unidade da despesa.
VALOR	Fracionário	Valor total da despesa.

3.6 - View IVW_PROCESSO

Lista os processos comerciais que possuem itens disponíveis para faturamento.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
NRPROCESSO	Texto (20)	Número visual do processo comercial para opcionalmente constar na nota fiscal.
IDPROCESSO	Texto (250)	Identificação do processo comercial.
CNPJCPFCON	Texto (20)	CNPJ ou CPF do contratante, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFSOL	Texto (20)	CNPJ ou CPF do solicitante, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFREP	Texto (20)	CNPJ ou CPF do representante comercial, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFFAT	Texto (20)	CNPJ ou CPF para faturamento, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFENVIONF	Texto (20)	CNPJ ou CPF para envio de nota fiscal, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CNPJCPFENVIORA	Texto (20)	CNPJ ou CPF para envio de resultados das análises, sem formatação de ponto, traço ou barra.
CDCONTATOCON	Inteiro	Código do contato do contratante.
CDCONTATOSOL	Inteiro	Código do contato do solicitante.
CDCONTATOREP	Inteiro	Código do contato do representante comercial.
CDCONTATOFAT	Inteiro	Código do contato do faturamento.
CDCONTATOENVIONF	Inteiro	Código do contato para envio de nota fiscal.
CDCONTATOENVIORA	Inteiro	Código do contato para envio de resultados das análises.
DTEDICAO	Data e Hora	Data da última edição do processo.
DIAVENCIMENTOFAT	Inteiro	Dia fixo para vencimento da fatura.
DIAFECHAMENTOFAT	Inteiro	Dia fixo para fechamento da fatura.
IDLIBERAFAT	Texto (100)	Identificação da forma de liberação para faturamento.
NMLIBERAFAT	Texto (100)	Nome da forma de liberação para faturamento.
IDCONDPGTO	Texto (100)	Identificação da condição de pagamento.
IDFORMAPGTO	Texto (100)	Identificação da forma de pagamento.
IDUNIDADESER	Texto (100)	Identificação da unidade de serviço do processo.
IDUNIDADENEG	Texto (100)	Identificação da unidade de negócio do processo.
IDUDPROCESSO01	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 01.
IDUDPROCESSO02	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 02.
IDUDPROCESSO03	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 03.
IDUDPROCESSO04	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 04.
IDUDPROCESSO05	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 05.
IDUDPROCESSO06	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 06.
CDUDPROCESSO01	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 01.
CDUDPROCESSO02	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 02.
CDUDPROCESSO03	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 03.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
CDUDPROCESSO04	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 04.
CDUDPROCESSO05	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 05.
CDUDPROCESSO06	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 06.
NMUDPROCESSO01	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 01.
NMUDPROCESSO02	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 02.
NMUDPROCESSO03	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 03.
NMUDPROCESSO04	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 04.
NMUDPROCESSO05	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 05.
NMUDPROCESSO06	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 06.
VLACUMULADO	Fracionário	Valor acumulado do processo.

3.7 - View IVW_OBSPROCESSO

Lista as observações do processo.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDTIPOOBSERVACAO	Inteiro	Código do tipo de observação.
DTEDICAO	Data e Hora	Data da última edição da observação.
OBSERVAÇÃO	Texto (2000)	Observação.

3.8 - View IVW_OBSAMOSTRA

Lista as observações da amostra.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDITEM	Inteiro	Código do item do processo.
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
CDTIPOOBSERVACAO	Inteiro	Código do tipo de observação.
DTEDICAO	Data e Hora	Data da última edição da observação.
OBSERVAÇÃO	Texto (2000)	Observação.

3.9 - View IVW_TIPOOBSERVACAO

Lista a classificação dos tipos de observação das amostras e processos.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
CDTIPOOBSERVACAO	Inteiro	Código seqüencial do tipo de observação.
NMTIPOOBSERVACAO	Texto (100)	Nome do tipo de observação.

3.10 - View IVW_INFOAMOSTRA

Lista as informações da amostra.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXPROCESSO	Inteiro	Código seqüencial do processo comercial.
CDITEM	Inteiro	Código do item do processo.
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
NMINFO	Texto (100)	Nome da informação.
NMGRPINFO	Texto (100)	Nome do grupo da informação.
VLINFO	Texto (250)	Informação.

3.11 - View IVW_EMPRESA

Lista os dados das empresas.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXEMPRESA	Inteiro	Código seqüencial da empresa.
CNPJCPF	Texto (20)	CNPJ ou CPF da empresa, sem formatação de ponto, traço ou barra.
RAZAOSOCIAL	Texto (250)	Razão social.
NMFANTASIA	Texto (250)	Nome fantasia.
IE	Texto (20)	Inscrição estadual.
IM	Texto (20)	Inscrição municipal.
EMAIL	Texto (150)	Endereço de e-mail da empresa.
URL	Texto (150)	Endereço do site da empresa.
FLPESSOAFISICA	Texto (1)	Indica se é pessoa física ou pessoa jurídica. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
FLESTRANGEIRA	Texto (1)	Indica se é estrangeira. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
FLPROVISORIO	Texto (1)	Indica se o cadastro da empresa é provisório. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
DTEDICAO	Data e Hora	Data da última edição da empresa.
DIAVENCIMENTOOFAT	Inteiro	Dia fixo para vencimento da fatura.
DIAFECHAMENTOOFAT	Inteiro	Dia fixo para fechamento da fatura.
IDUNIDADESER	Texto (100)	Identificação da unidade de serviço da amostra.
IDUNIDADENEG	Texto (100)	Identificação da unidade de negócio da amostra.
IDUEMPRESA01	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 01.
IDUEMPRESA02	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 02.
IDUEMPRESA03	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 03.
IDUEMPRESA04	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 04.
IDUEMPRESA05	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 05.
IDUEMPRESA06	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 06.
CDUEMPRESA01	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 01.
CDUEMPRESA02	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 02.
CDUEMPRESA03	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 03.
CDUEMPRESA04	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 04.
CDUEMPRESA05	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 05.
CDUEMPRESA06	Texto (250)	Texto do cadastro personalizado 06.
NMUDEMPRESA01	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 01.
NMUDEMPRESA02	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 02.
NMUDEMPRESA03	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 03.
NMUDEMPRESA04	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 04.
NMUDEMPRESA05	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 05.
NMUDEMPRESA06	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 06.
OBSEMPRESA	Texto(2000)	Observações da empresa

3.12 - View IVW_ENDERECO

Lista os endereços das empresas.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXEMPRESA	Inteiro	Código seqüencial da empresa.
CNPJCPF	Texto (20)	CNPJ ou CPF da empresa, sem formatação de ponto, traço ou barra.
NMTIPOENDERECO	Texto (100)	Tipo de endereço.
NMLOGRADOURO	Texto (30)	Nome do logradouro.
ENDERECO	Texto (50)	Endereço.
NUMERO	Texto (10)	Número.
COMPLEMENTO	Texto (30)	Complemento.
BAIRRO	Texto (30)	Nome do bairro.
NMCIDADE	Texto (100)	Nome da cidade.
SIGLAESTADO	Texto (5)	Sigla do estado.
PAIS	Texto (50)	Nome do país.
CEP	Texto (10)	CEP, formatado com ponto e traço.
CAIXAPOSTAL	Texto (10)	Caixa postal.
DDI	Texto (5)	Código DDI.
DDD	Texto (5)	Código DDD.
FONE	Texto (20)	Número do telefone.
FAX	Texto (20)	Número do fax.

3.13 View IVW_CONTATO

Lista os contatos das empresas.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
CDCONTATO	Inteiro	Código seqüencial do contato.
IDAUXEMPRESA	Inteiro	Código seqüencial da empresa.
CNPJCPF	Texto (20)	CNPJ ou CPF da empresa vinculada ao contato, sem formatação de ponto, traço ou barra.
NMCONTATO	Texto (100)	Nome do contato.
SOBRENOME	Texto (50)	Sobrenome do contato.
NMAREACONTATO	Texto (100)	Nome da área do contato.
NMPOSICAOHIER	Texto (100)	Nome da posição hierárquica do contato.
NMCARGO	Texto (100)	Nome do cargo do contato.
DDD	Texto (5)	DDD do fone fixo.
FONE	Texto (20)	Número do telefone fixo.
FAX	Texto (20)	Número do fax.
RAMAL	Texto (5)	Número do ramal.
DDDCELULAR	Texto (5)	DDD do celular.
CELULAR	Texto (20)	Número do celular.
EMAIL	Texto (150)	Email do contato.
IDUDCONTATO01	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 01.
IDUDCONTATO02	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 02.
IDUDCONTATO03	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 03.
IDUDCONTATO04	Texto (100)	Identificação do cadastro personalizado 04.
NMUDCONTATO01	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 01.
NMUDCONTATO02	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 02.
NMUDCONTATO03	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 03.
NMUDCONTATO04	Texto (250)	Texto do campo livre personalizado 04.
OBSCONTATO	Texto (2000)	Observações do contato.

3.14 Tabela ITB_AMOSTRASFAT

Tabela que receberá o código das amostras importadas pelo sistema de faturamento. Para cada item adicionado em um pedido de faturamento ou nota fiscal, deve ser adicionado nesta tabela um registro contendo o CDAMOSTRA do item, um identificador do pedido ou nota fiscal do sistema financeiro ou de faturamento (NRFATURAMENTO) e a data e hora que o registro foi inserido.

No momento do faturamento, deve ser informado o valor faturado no campo VLFATURADO e se o faturamento foi finalizado ou não no campo FLFINALIZADO. Caso o faturamento ocorra por completo em apenas uma nota fiscal, VLFATURADO deverá ser preenchido com o valor total do faturamento e FLFINALIZADO deverá ser preenchido com o valor "S".

Também pode ser utilizado o recurso de faturamento em mais de uma etapa, como por exemplo, as despesas de coleta que são cobradas na chegada da amostra no laboratório e as despesas do serviço são cobradas na emissão do boletim de análises. Na cobrança inicial somente das despesas, VLFATURADO teria um valor parcial e FLFINALIZADO seria igual a "N". Mais adiante, na emissão do boletim de análise, adiciona-se um novo registro na tabela ITB_AMOSTRASFAT com VLFATURADO contendo o restante do valor faturado e FLFINALIZADO contendo o texto "S".

Caso um item seja excluído do pedido de faturamento ou nota fiscal durante a sua elaboração ou a nota fiscal tenha sido cancelada para posterior cobrança, os registros contendo o valor do campo "CDAMOSTRA" do item excluído ou cancelado para esta nota não deverão ser excluídos da tabela ITB_AMOSTRASFAT, mas deverá ser alterado o campo FLATIVO para "N". Isto garante que o item excluído ou cancelado possa ser faturado novamente e mantém os dados em histórico.

Se existir algum registro desta amostra na tabela "ITB_AMOSTRASFAT" com o campo "FLFINALIZADO" = "S", o faturamento será considerado finalizado. Para que a amostra volte a aparecer na view "IVW_ITENSFATURA", não poderá existir nenhuma referência à amostra com o campo "FLFINALIZADO" = "S" e FLATIVO = "S" na tabela "ITB_AMOSTRASFAT".

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
CDAMOSTRA	Inteiro	Código seqüencial da amostra.
IDFATURAMENTO	Inteiro	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento.
NRFATURAMENTO	Texto (50)	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento.
DTREGISTRO	Data e Hora	Data e hora da importação da amostra pelo sistema de faturamento.
DTVENCIMENTO	Data e Hora	Data do vencimento da fatura.
DTPAGAMENTO	Data e Hora	Data do pagamento da fatura.
VLFATURADO	Fracionário	Valor faturado.
FLATIVO	Texto (1)	Indica se o registro atual está válido. Este campo é utilizado em casos de cancelamento de nota fiscal para que os itens cancelados possam ser faturados novamente e não perder dados históricos por exclusão de registros. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
FLFINALIZADO	Texto (1)	Indica o faturamento foi finalizado. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
OBSERVAÇÃO	Texto (250)	Observações gerais.

3.15 Tabela ITB_COLETASFAT

Tabela que receberá o código das coletas importadas pelo sistema de faturamento. Para cada coleta adicionada em um pedido de faturamento ou nota fiscal, deve ser adicionado nesta tabela um registro contendo o IDAUXCOLETA da coleta, um identificador do pedido ou nota fiscal do sistema financeiro ou de faturamento (NRFATURAMENTO) e a data e hora que o registro foi inserido.

As regras para inserção, edição e exclusão de dados desta tabela são as mesmas para a tabela ITB_AMOSTRASFAT.

Nome do Campo	Tipo de Dado	Descrição
IDAUXCOLETA	Inteiro	Código da coleta da amostra.
IDFATURAMENTO	Inteiro	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento.
NRFATURAMENTO	Texto (50)	Número do pedido de faturamento ou nota fiscal gerado pelo sistema de faturamento.
DTREGISTRO	Data e Hora	Data e hora da importação da coleta pelo sistema de faturamento.
DTVENCIMENTO	Data e Hora	Data do vencimento da fatura.
DTPAGAMENTO	Data e Hora	Data do pagamento da fatura.
VLFATURADO	Fracionário	Valor faturado.
FLATIVO	Texto (1)	Indica se o registro atual está válido. Este campo é utilizado em casos de cancelamento de nota fiscal para que os itens cancelados possam ser faturados novamente e não perder dados históricos por exclusão de registros. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
FLFINALIZADO	Texto (1)	Indica o faturamento foi finalizado. Valores possíveis: "S" = Sim e "N" = Não.
OBSERVAÇÃO	Texto (250)	Observações gerais.